




LumiraDx CRP Test

Schnelle klinische Beurteilung von Infektionen, Entzündungen und Gewebeerkrankungen¹

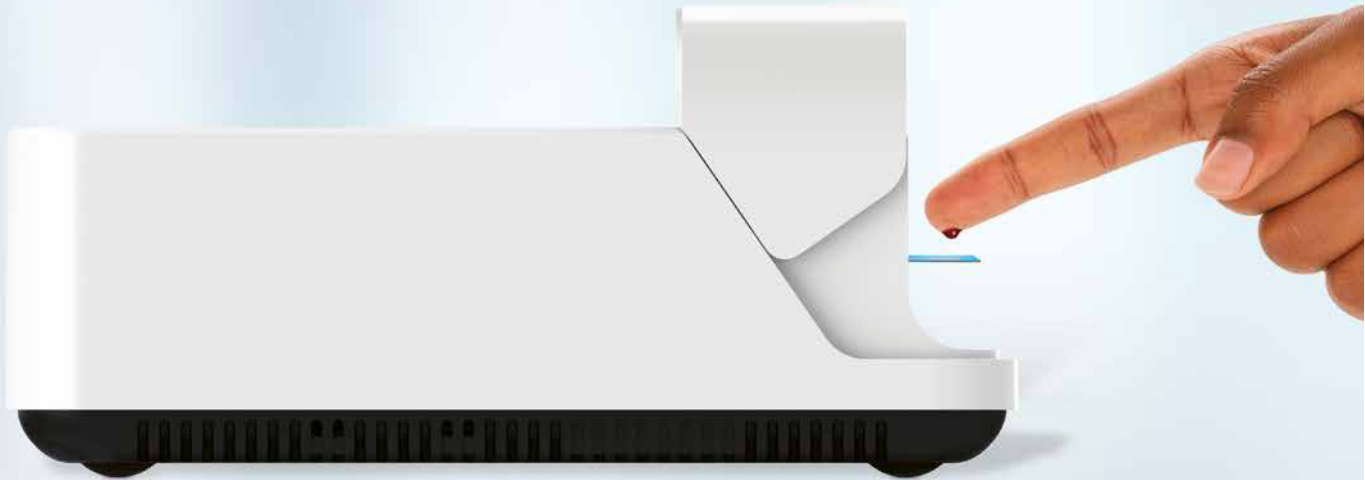

Schnelle Ergebnisse: Zuverlässige Ergebnisse mit Kapillarblut aus der Fingerbeere in nur 4 Minuten



Testzugriff: Handliches, mobiles Gerät für den Einsatz an fast jedem Ort



Einfacher Ablauf: Einfacher Testablauf mit unkomplizierter Probennahme aus Kapillarblut – keine Venenpunktion erforderlich



Problemlose Lagerung: Ungekühlt bei Raumtemperatur (2 – 30 °C) lagerbar



Diagnostik leicht gemacht. Mit dem LumiraDx System.

Verwendungszweck und medizinischer Nutzen

CRP-Tests am Point-of-Care erhöhen die diagnostische Sicherheit und unterstützen so die Entscheidung über den angemessenen Einsatz von Antibiotika in der Primärversorgung. Mithilfe des CRP-Tests können weniger Antibiotika verschrieben werden, ohne dass dies zu Lasten der Patientengenesung geht.²⁻⁴


Einfacher Ablauf

Der LumiraDx CRP Test ist für die Verwendung mit dem LumiraDx System vorgesehen. Lesen Sie vor der Durchführung dieses Tests die im Lieferumfang des Kits enthaltene Gebrauchsanweisung genau durch.



ca. 1 Minute

1. Teststreifen einführen

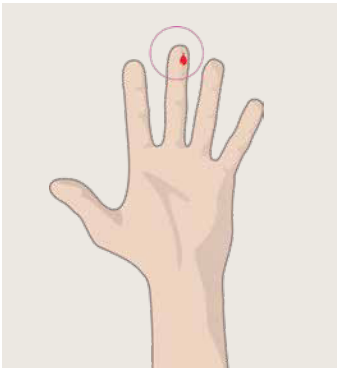

ca. 1 Minute

2. Probe entnehmen



ca. 4 Minuten

3. Auftragen und starten



ca. 4 Minuten

4. Ergebnisausgabe

Technische Daten

Probenart	Blut aus der Fingerbeere, Vollblut (Lithium-Heparin) oder Plasma (Lithium-Heparin)
Probenmenge	20 µl
Ergebnisausgabe nach	4 Minuten
Präzision	< 10 % VK
Messbereich	5,0 – 250,0 mg/l
Hämatokrit	15 – 55 %
Transferröhrchen	Lithium-Heparin
Externe Kontrollen	Multi-QK (CRP & D-Dimer) Flüssig-Qualitätskontrolle in 2 Konzentrationen 3 × 3-ml-Fläschchen/Konzentration/Kit Lagerung bei 2 – 8 °C Separat erhältlich
Lagertemperatur Teststreifen	2 – 30 °C

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim



Produktvideos und weitere
Informationen finden Sie unter:
www. Roche.de/lumiradx

LUMIRADX ist eine Marke von Roche.
© 2025 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

www. Roche.de

Quellen
¹ LumiraDx Produktbeilage CRP (Version 5, 2024-02)
² Aabenhus R, Jensen JU, Jørgensen KJ, Hróbjartsson A, Bjerrum L. Biomarkers as point-of-care tests to guide prescription of antibiotics in patients with acute respiratory tract infections in primary care. Cochrane Database Syst Rev. 6. Nov. 2014;(11):CD010130.
³ Antheriens S, Tonkin-Crine S, Cals JW, et al. Clinicians' views and experiences of interventions to enhance the quality of antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections. J Gen Intern Med. Apr. 2015;30(4):408-416.
⁴ Cooke J, Butler C, Hopstaken R, et al. Narrative review of primary care point-of-care testing (POCT) and antibacterial use in respiratory tract infection (RTI). BMJ Open Respir Res. 6. Mai 2015;2(1):e000086.